


POLIGRIP POWER HOLD + SEAL DENTURE ADHESIVE



The precision nozzle enables exactly the right amount of product to be applied around the edge of the denture forming an all-around seal

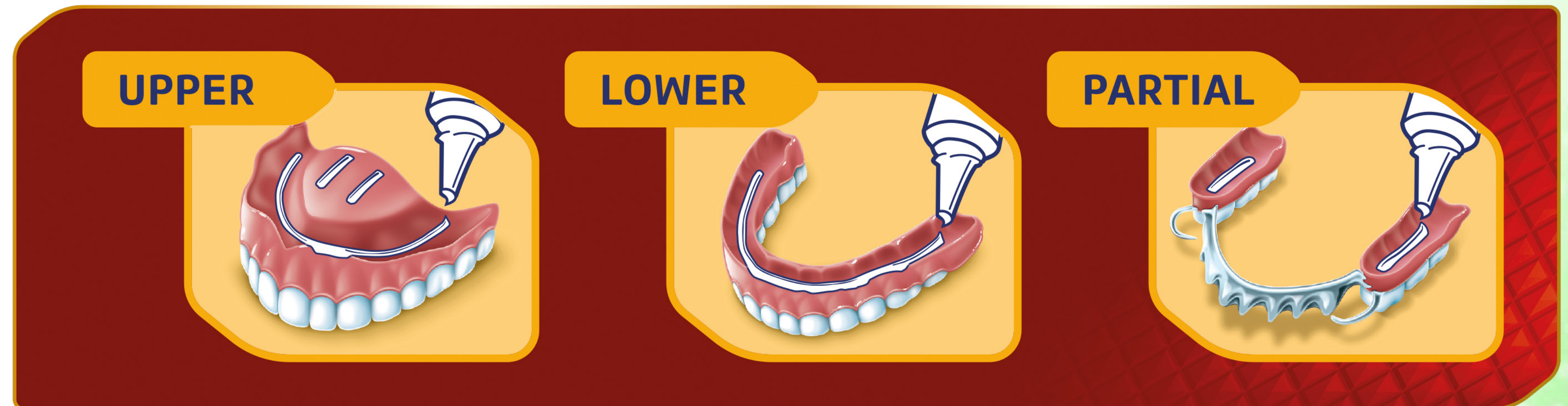

APPLYING:

1. Clean and dry your dentures
2. Apply Poligrip as shown in the diagram, not too close to the denture edges.
 - a. **Upper denture:** one long continuous strip with two shorter strips in the middle
 - b. **Lower denture:** one long continuous strip
 - c. **Partial denture:** two short strips
3. Rinse mouth before inserting dentures
4. Press dentures into place, hold firmly and bite down for a few seconds to secure hold

REMOVING:

1. Swish mouth with water
2. Slowly remove denture using a rocking motion
3. Remove adhesive residue from denture and mouth with warm water and a soft bristle brush
4. Use POLIDENT Denture Cleanser to thoroughly clean your denture and then rinse with water

- Poligrip seals out 74% of food particles^{*1}
- Poligrip gives users up to 38% increase in bite force^{**2}



POLIDENT 3-MINUTE DAILY DENTURE CLEANSER

- STEP 01** Drop one Polident cleanser tablet into enough very warm (not hot) water to cover denture or partial
- STEP 02** After soaking for the time indicated, brush denture with solution using a soft brush. Discard remaining solution immediately after use
- STEP 03** Rinse denture thoroughly with running water

**#1 DENTIST
RECOMMENDED
BRAND OF DENTURE
CLEANSER**



- Polident 3-Minute Daily Denture Cleanser kills 99.99% of odor-causing bacteria on dentures^{+3,4}
- Dentures are 10x softer than natural teeth⁵ and can be scratched by regular toothpaste

*Vs. no adhesive after 1 hour on a lower full denture. **Vs. no adhesive after 1 hour. †In laboratory tests.

References: 1. Haleon Data on File, 2011. 2. Munoz C et al. Prosthodont 2012; 21: 123-9. 3. Haleon Data on File, 2010. Micro Study, MD#056-10, Ignar & Ona.

4. Haleon Data on File, 2012. MD#012-2395. 5. Aleksandrova K, 2012. Literature review. 6. Charman KM et al. Letter in Applied Microbiology. 2009; 48:472-477.

Trademarks are owned by or licenced to the Haleon group of companies. PM-US-POLD-23-00008



POLIDENT

To learn more, visit mydenturecare.com


ADHESIVO PARA DENTADURA POLIGRIP POWER HOLD + SEAL



La boquilla de precisión permite aplicar exactamente la cantidad correcta de producto alrededor del borde de la dentadura formando un sello completo



Escanea
para ahorrar

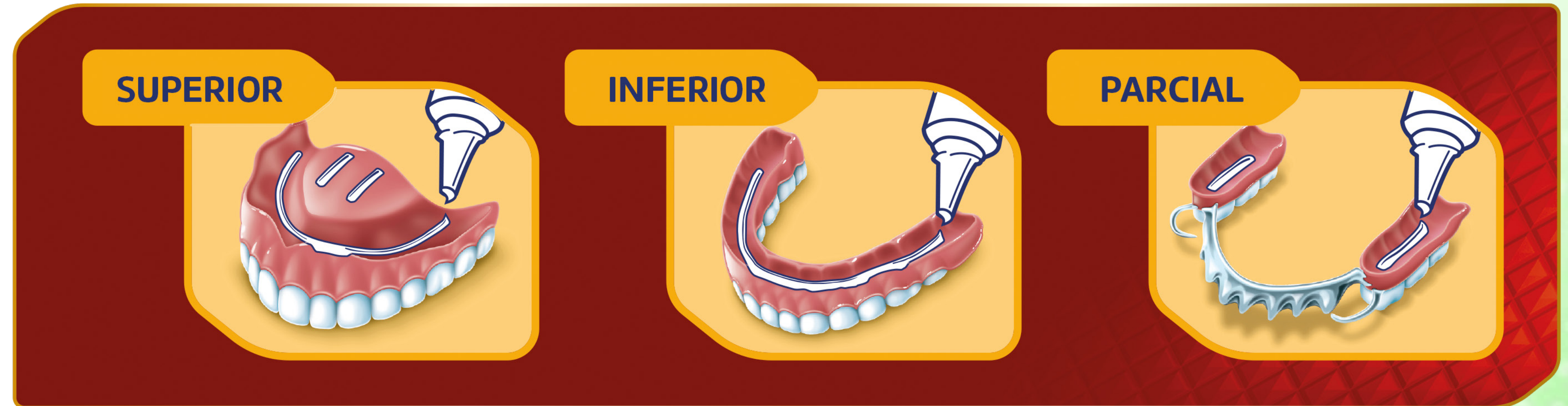

APLICACIÓN:

1. Limpie y seque su dentadura postiza
2. Aplique Poligrip como se muestra en el diagrama, no demasiado, cerca de los bordes de la dentadura
 - a. **Dentadura superior:** una tira continua larga con dos tiras más cortas en el medio
 - b. **Dentadura inferior:** una tira continua larga
 - c. **Dentadura parcial:** dos tiras cortas
3. Enjuague la boca antes de insertar la dentadura postiza
4. Presione las dentaduras en su lugar, sostenga firmemente y muerda durante unos segundos

EXTRACCIÓN:

1. Enjuague la boca con agua tibia por 1 minuto
2. Retire lentamente la dentadura postiza con un movimiento de balanceo
3. Retire los residuos de adhesivo de la dentadura postiza y la boca con agua tibia y un cepillo de cerdas suaves
4. Utilice el limpiador de dentaduras postizas POLIDENT para limpiar a fondo su dentadura postiza y luego enjuague con agua



- Poligrip deja fuera el 74% de las partículas de alimentos*¹
- Poligrip incrementa hasta un 38% la fuerza de la mordida**²

LIMPIADOR DE DENTADURAS POSTIZAS DIARIO POLIDENT DE 3 MINUTOS

- PASO 01** Deje caer una tableta limpiadora Polident en suficiente agua tibia (no caliente) para cubrir la dentadura postiza o parcial
- PASO 02** Después de remojar durante el tiempo indicado, cepille la dentadura postiza con la solución y un cepillo suave para dentaduras. Deseche la solución restante inmediatamente después de su uso
- PASO 03** Enjuague bien la dentadura postiza con agua corriente

**EL LIMPIADOR DE
DENTADURAS POSTIZAS
#1 RECOMENDADO
POR DENTISTAS**



- El limpiador de dentaduras postizas diario Polident de 3 minutos mata el 99.99% de las bacterias que causan mal olor en las dentaduras postizas^{3,4}
- Las dentaduras son 10 veces más suaves que los dientes naturales⁵ y se pueden rallar con pasta de dientes normal

* En comparación con una sin adhesivo después de 1 hora en una dentadura postiza completa inferior. **En comparación con una sin adhesivo después de 1 hora.

† En estudios de laboratorio

Referencias: 1. Datos archivados de Haleon, 2011. 2. Munoz C *et al.* Prosthodont 2012; 21: 123-9. 3. Datos archivados de Haleon, 2010. Micro estudio, MD#056-10, Ignar & Ona. 4. Datos archivados de Haleon, 2012. MD#012-2395. 5. Aleksandrova K, 2012. Revisión de publicaciones. 6. Charman KM *et al.* Carta en Microbiología Aplicada. 2009; 48:472-477.

Las marcas comerciales son propiedad o están licenciadas al grupo de empresas Haleon. PM-US-POLD-24-00023



POLIDENT

Para obtener más información, visite mydenturecare.com